

CryoPro, Cryochirurgie uit de spuitbus

Introductie

Voor cryochirurgische ingrepen waarbij vloeibare stikstof wordt gebruikt als koudemiddel, staan een tweetal hoogwaardige instrumenten ter beschikking die voorzien kunnen worden van veel verschillende tips. De vorm en grootte van de tip bepaalt de overdracht van koude op de te behandelen plaats. De aansluiting op de koudekop is overigens uitwisselbaar met de meest voorkomende systemen, zodat veelal ook tips van ander fabricaat gebruikt kunnen worden.

Uit het aanbod van tips kunt u kiezen uit verschillende typen. De standaard typen staan afgebeeld op de grote foto, speciale los bij te bestellen modellen staan op de achterpagina.

Er zijn twee modellen CryoPro beschikbaar, met een 350 of 500 ml vaatje.

Methode

Door zijn eenvoud, hoge nauwkeurigheid en lage kosten, is de cryotherapie een volledig erkende en vaak toegepaste methode voor de behandeling van een variëteit aan huidletsels. De behandeling staat bekend als weinig pijnlijk en vergt normaal gesproken geen anesthesie.

De CryoPro is te verkiezen boven andere systemen zoals het gebruik van lachgas, dat bevriest bij -85°C . Vloeibare stikstof is -196°C en kan met de spuittips en contactoppervlakken beter gedoseerd worden, waardoor de behandeling effectiever is. In ziekenhuizen is vloeibare stikstof over het algemeen makkelijk beschikbaar.

De CryoPro biedt een gewilde combinatie van lage temperatuur, een uitgebreid arsenaal toebehoren voor spuiten of contactvriezen en een hoge mate van probleemoplossend vermogen. De cosmetische resultaten zijn uitstekend en maken de CryoPro tot een van de meest universele cryochirurgische instrumenten. De kosten per behandeling zijn laag.

Iedere CryoPro wordt geleverd met een standaardset spuittips voor de meest gebruikelijke behandelingen, zoals wratten en kleine tumoren. In optie zijn contacttips in verschillende maten en vormen beschikbaar. Deze typen worden onder andere ingezet als de te behandelen plaats moeilijk te isoleren is, zoals in de buurt van het oog, de keel of de anus. De juiste maat contacttip kan gekozen worden op basis van het feitelijk te behandelen huidletsel. Uiteraard kunnen deze spuit- en contacttips op de juiste manier worden gedesinfecteerd, of met stoom worden gesteriliseerd.

Garantie

De CryoPro chirurgische apparatuur wordt voor een periode van drie (3) jaar gegarandeerd tegen materiaal en fabricagefouten.






Contacttips van 1, 2 en 3



Contacttips van 1, 2 en 3




Contacttips van 4 en 5 mm

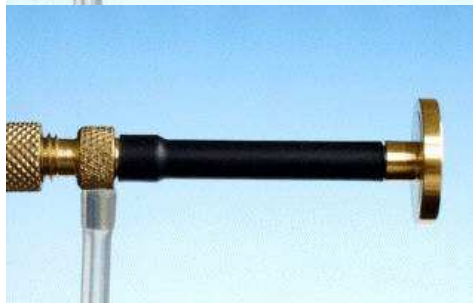

Contacttips van 6 en 8 mm



Speciale spraytip voor acné
behandeling

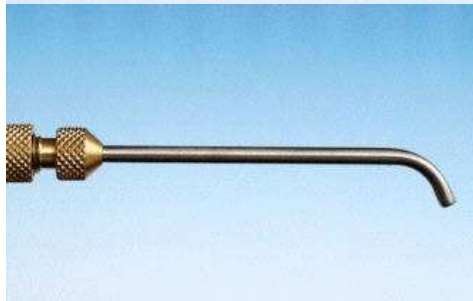


Contacttips met groot
oppervlak van 10, 15, 20
en 30 mm.

Rubberconussen voor
afscherming.

Spuitlans voor werken op
enige afstand

Spuitlans met kromming
voor moeilijk bereikbare
plekken.

Lexaanconussen voor het
afschermen van de
werkplek, transparant voor
beter zicht.

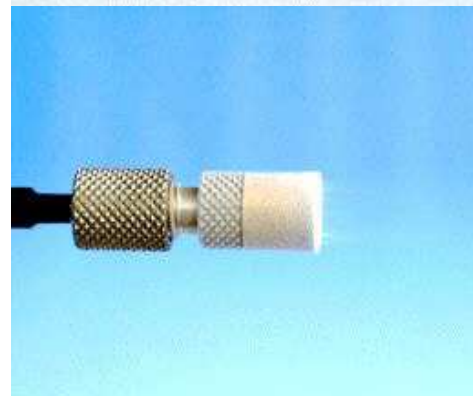

Linde Gas Cryoservices B.V.
Koningskampen 5A, Postbus 121, NL-5320 AC Hedel
Tel. +31 73 599 6161, Fax +31 73 599 6132
Info.lgc.nl@linde.com
www.linde-gascryoservices.com